

## Patienteninformation

Nur zur Abgabe an Patient:innen, denen Oxybutyninhydrochlorid-Lösung zur intravesikalen Anwendung verordnet wurde.

Diese Anweisungen richten sich ausschliesslich an Menschen mit eingeschränkter Handfunktion, die alleine eine Instillation in die Blase vornehmen müssen.

## Wichtige Information zur Fertigspritze:


Wir haben intensiv daran gearbeitet, die Anwendung der Fertigspritze weiter zu verbessern und freuen uns, Ihnen unsere Produktweiterentwicklung vorzustellen:

Ab sofort benötigen Sie keinen Stufenkegeladapter mehr und können die Fertigspritze mit Instillationslösung direkt mit dem Katheter verbinden.

Auf den folgenden Seiten haben wir die vereinfachte Anwendung für Sie zusammengefasst.



## Wie funktioniert die Instillation?

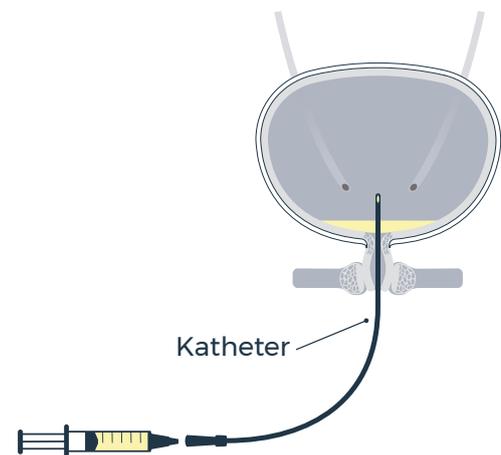

Verschreibt Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein Arzneimittel zur Instillation in einer Fertigspritze, erhalten Sie **ein Rezept für die Spritze mit Instillationslösung**.

## Wie bereiten Sie die Instillation vor?


Legen Sie alles, was Sie für die Instillation benötigen, vor der Katheterisierung bereit:

- Fertigspritze
- Desinfektionsmittel
- Katheter und weitere Materialien zur Katheterisierung
- optional: Katheterklemme und Urinbeutel

Vor der Instillation sollte die Blase vollständig über einen Katheter entleert worden sein. Entfernen Sie den Verschluss der Spritze, ohne die Spritzenspitze zu berühren. Verbinden Sie diese mit dem Katheter.



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere kostenlose **Patient:innen-Hotline unter: +49 221 791014160**  
Geschäftszeiten: Mo.–Fr. 8–18 Uhr

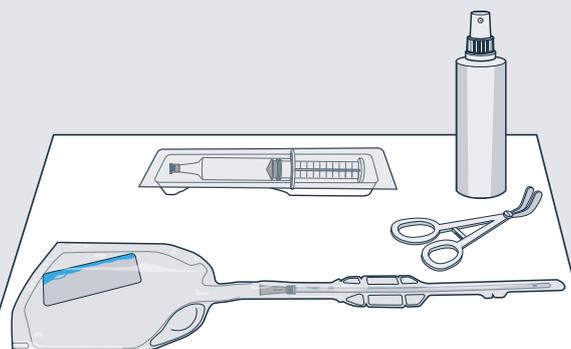


Die folgende Anleitung finden Sie auch als Video unter [www.farco.de/produkte/instillations-therapie](http://www.farco.de/produkte/instillations-therapie)


# Anleitung zur Handhabung der Fertigspritze

Bitte achten Sie darauf, den Spritzenkonus nicht mit dem Mund zu berühren. Beim Öffnen mit dem Mund bestehen ein erhöhtes Infektionsrisiko, Verschluckungsgefahr und das Risiko, dass Inhalt der Spritze in den Mundraum gelangt.

**Vor Entfernen der Verschlusskappe:**  
Druckpunkt durch Eindrücken oder durch kurzes Zurückziehen der Kolbenstange lösen

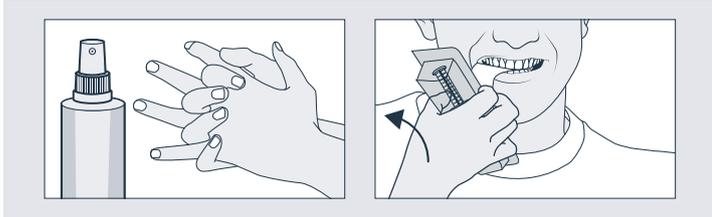


**1)** Desinfizieren Sie sich die Hände, wie auf der Verpackung Ihres Desinfektionsmittels angegeben. Öffnen Sie die Verpackung der **Fertigspritze** an der dafür markierten Stelle, indem Sie sie mit der Lasche nach oben halten und mit den Zähnen aufziehen.

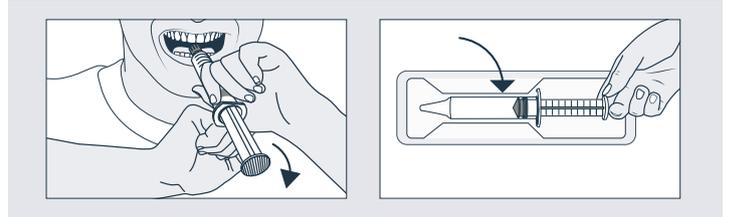

**2)** Nehmen Sie die Fertigspritze heraus. Ziehen Sie die Verschlusskappe ab und legen Sie die Fertigspritze anschliessend zurück in die Verpackung.




**3)** Beginnen Sie mit der Katheterisierung. (Eine Anleitung finden Sie unter [www.farco.de/isk](http://www.farco.de/isk).) Entleeren Sie Ihre Blase vollständig über den Katheter.

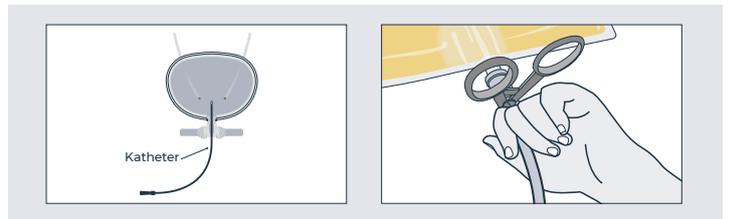


**4)** Stellen Sie sicher, dass sich der Katheter noch in der Blase befindet, ehe Sie mit dem Instillieren beginnen.

**TIPP:** Klemmen Sie den Katheter mit einer Katheterklemme ab, entfernen Sie ggf. den Urinbeutel und nutzen Sie die Klemme, um den Katheter zu halten.

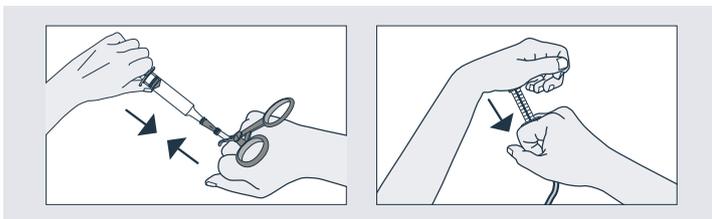

**5)** Nehmen Sie die vorbereitete Spritze aus der Verpackung. Verbinden Sie die Spritze mit dem Katheter. Legen Sie alles auf Ihren Oberschenkeln ab und lösen Sie mit dem Daumen die Klemme. Halten Sie nun die Spritze unter den Spritzenflügeln fest und drücken Sie mit der anderen Hand den Kolben der Spritze herunter.

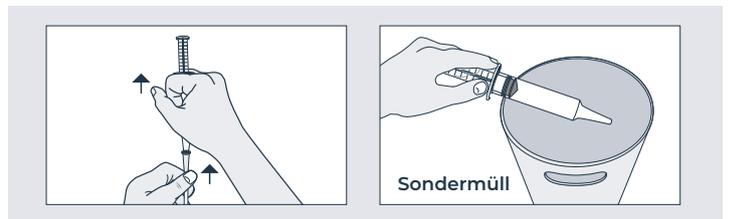

**6)** Entfernen Sie die Fertigspritze zusammen mit dem Katheter zwecks Entsorgung. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. Entsorgen Sie die Arzneimittel zur Schonung der Umwelt nicht im Abwasser.